
NANOSTICKA®


SINGLE-DRUG SCREEN TEST PANEL
BRUKSANVISNING

1. Ta teststrippen ut av forpakningen umiddelbart før bruk (vær oppmerksom på at testen har rom temperatur og at utløpsdatoen ikke er overskredet før forpakningen åpnes).

2. Dypp og hold teststrippen ca. 1 cm ned i urinen og vent til urinen begynner å trekke opp i filtret.

3. Legg testen på en plan overflate.

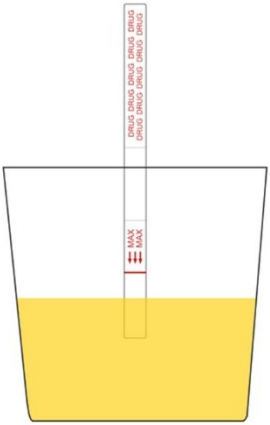

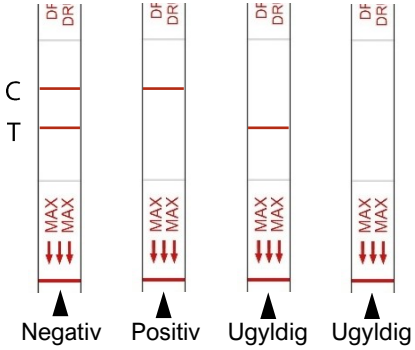

Slik avleses testen

Avles testen etter ca. 3 minutter. Kontrollstreken (C) må være synlig; ellers er testen ugyldig.

Er både kontrollstreken (C) og teststreken (T) synlige etter 3 minutter, er resultatet negativt.

Er bare kontrollstreken synlig, vent til det har gått totalt 10 minutter. Hvis teststreken fortsatt ikke er synlig, er resultatet positivt.

Selv en svak teststrek (T) betyr at resultatet er negativt.

Resultatet må aldri avleses etter 10 minutter.